



MANUAL DE USUARIO

Anclaje de 2 puntos (easy release)



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. INFORMACIÓN	4
3. SYNERGY SHAPE BACK CON ANCLAJE DE 2 PUNTOS	5
4. INSTALACIÓN Y USO (SISTEMA DE MONTAJE AJUSTABLE)	7
5. INSTALACIÓN Y USO (SISTEMA DE MONTAJE CON TORNILLOS)	11
6. AJUSTES DE CONFORT (SISTEMA DE MONTAJE AJUSTABLE)	13
7. EXTRAER EL SYNERGY SHAPE BACK (SISTEMA DE MONTAJE AJUSTABLE)	16
8. LIMPIEZA	17
9. ALMACENAMIENTO	18
10. CUIDADO Y MANTENIMIENTO	19
11. GARANTÍA	20
12. NOTAS	21

1. INTRODUCCIÓN

Gracias y enhorabuena por adquirir su nuevo respaldo SYNERGY SHAPE BACK CON ANCLAJE DE 2 PUNTOS de Ayudas Tecno Dinámicas, S.L.

Nos complace proporcionarle productos seguros y confortables. Nuestro objetivo es asegurar su completa satisfacción. Esperamos sinceramente que disfruten de su respaldo de Ayudas Tecno Dinámicas, S.L.

El producto que ha comprado combina la técnica de los componentes de seguridad, confort y estilo. Estamos seguros de que las características de diseño le proporcionarán toda la utilidad que usted exige en sus actividades diarias. La comprensión de cómo utilizar de forma segura y cuidar de este producto debe ofrecerle años de funcionamiento libre de problemas.

Por favor, lea cuidadosamente el manual y siga todas las instrucciones de seguridad. Así se asegurará de que usted obtiene el máximo provecho de su respaldo.

Si no se siguen las instrucciones, advertencias y notas de este manual y las indicadas en su producto, podría resultar en lesiones personales y/o daños en el producto y anulará la garantía del producto.

2. INFORMACIÓN

Los siguientes símbolos se utilizan en todo el manual del propietario y en el producto para identificar advertencias y otra información importante. Es muy importante que los lea y entienda completamente.



¡ADVERTENCIA!

Indica una situación potencialmente peligrosa. Si no se siguen los procedimientos indicados puede ocasionarle lesiones físicas, daños a los componentes o mal funcionamiento. En el producto, este icono se representa como un símbolo negro sobre un triángulo amarillo con borde negro.



¡OBLIGATORIO!

Estas acciones deben ser ejecutadas como se especifica. El incumplimiento de las medidas obligatorias pueden causar lesiones personales y / o daños al equipo. En el producto, este icono se representa como un símbolo blanco sobre un punto azul con un borde blanco



¡PROHIBIDO!

Estas acciones están prohibidas. Estas acciones no deben ser realizadas en ningún momento ni circunstancia. Realizar una acción prohibida puede causar lesiones personales y / o daños al equipo. En el producto, este icono se representa como un símbolo negro con un círculo rojo y una barra roja.

NOTA: Estas instrucciones han sido recopilados de las especificaciones más recientes del producto disponible en el momento de su publicación. Nos reservamos el derecho de hacer cambios cuando sea necesario. Cualquier cambio en nuestro producto puede causar ligeras variaciones entre las ilustraciones y explicaciones en este manual y el producto que ha adquirido.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Los siguientes símbolos se utilizan en el producto para identificar advertencias, acciones obligatorias y acciones prohibidas. Es muy importante que usted lea y entienda completamente.



Lea y siga las instrucciones en el manual del propietario.



Peso máximos de asientos.



Eliminación y reciclaje

3. EL SYNERGY SHAPE BACK CON ANCLAJE DE 2 PUNTOS

El SYNERGY SHAPE BACK es un sistema único de respaldo que está disponible en las versiones alta, mediana/estándar, baja y contorno. El SYNERGY SHAPE BACK está disponible con un sistema completamente ajustable de montaje para la comodidad del usuario y adaptar las necesidades de posicionamiento con un sistema simplificado de tornillos. Las figuras 1, 2 y 3 proporcionan información sobre los componentes de punto y cojines del SYNERGY SHAPE BACK .

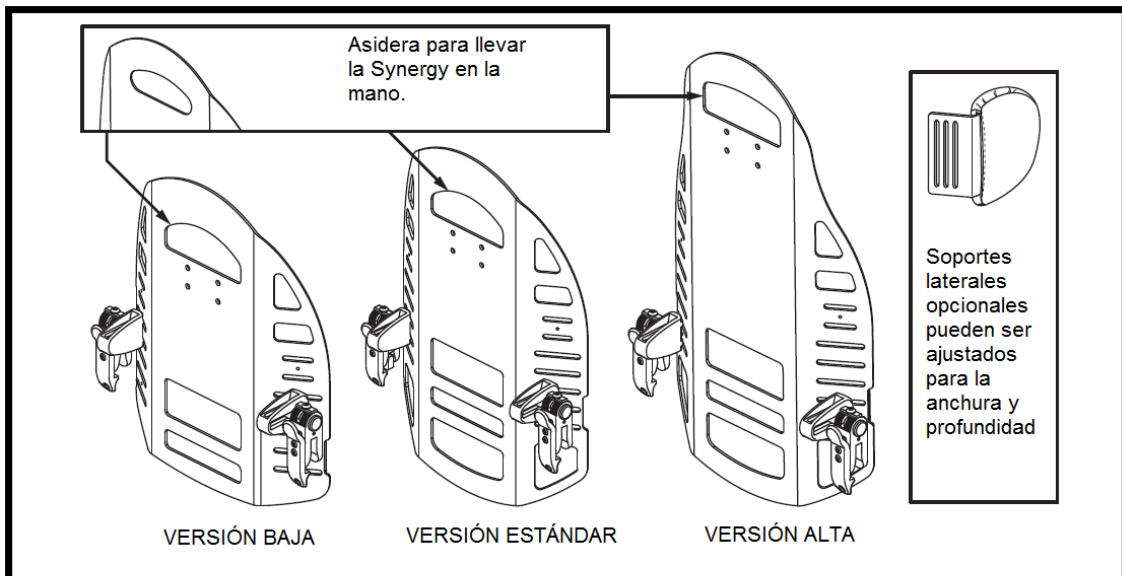


Figura 1. Synergy Shape Back 2 Point – Componentes traseros y laterales

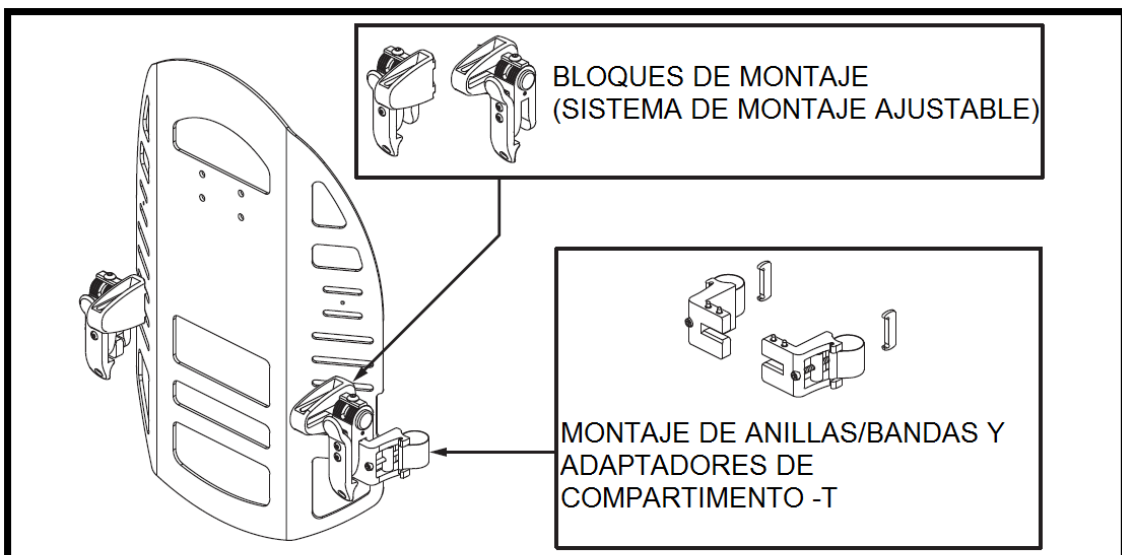


Figura 2. Synergy Shape Back 2 Point – Montaje de componentes anillas

SYNERGY SHAPE BACK ANCLAJE DE 2 PUNTOS

Utilice estos diagramas para familiarizarse con el funcionamiento y la ubicación de cada componente antes de usar el SYNERGY SHAPE BACK .

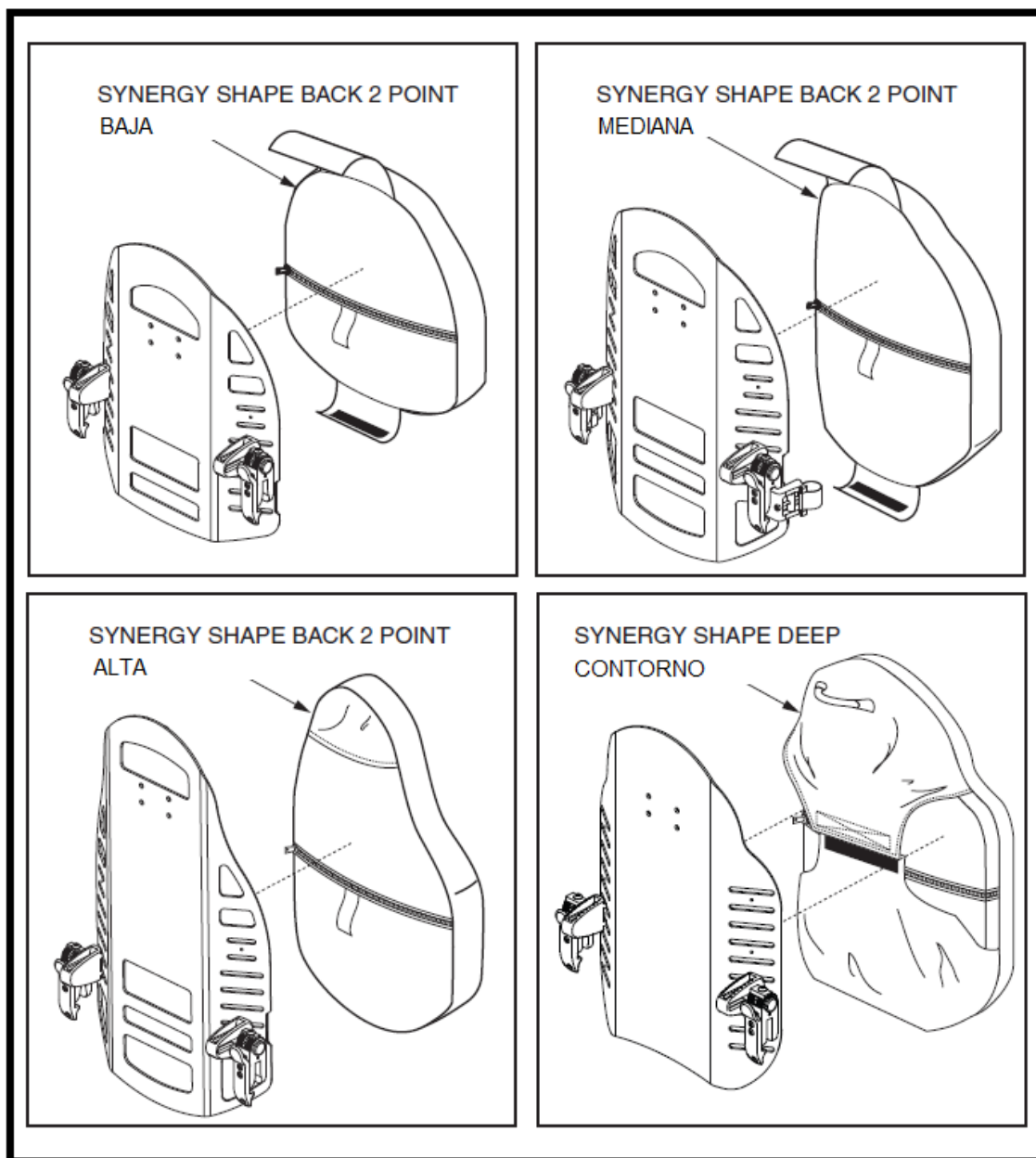


Figura 3. Synergy Shape Back 2 Point cojines

4. INSTALACIÓN Y USO (SISTEMA DE MONTAJE AJUSTABLE)

Para instalar el SYNERGY SHAPE BACK :

1. Mantenga el SYNERGY SHAPE BACK hacia arriba a la altura deseada en las cañas traseras y fíjese dónde se encuentran las anillas/bandas de montaje.
2. Instale el adaptador de ranura en el compartimento T si es necesario (para cañas con ranuras).
3. Comenzando por el interior de la caña trasera que queda enfrente del centro de la silla, envuelva la anilla/banda de montaje alrededor del exterior de la caña trasera. Fije el pasador de montaje en la banda de montaje de la ranura receptora. Vea la figura 4.
4. Apriete el tornillo de montaje.
5. Repita este procedimiento en el otro lado.



¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que las piezas están apretadas.

6. Una vez que los soportes de montaje están en su lugar, póngase detrás de la silla y alinee los bloques de montaje del respaldo con los soportes de montaje, asegurándose de que el respaldo está colocado justo dentro de la "L" del bloque de montaje. Vea la figura 5. Empuje el respaldo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

NOTA: Si cualquier identificador rojo es visible en el soporte de montaje, su respaldo no está bloqueado en su lugar. Vea la figura 5.

7. Instale el cojín de el SYNERGY SHAPE BACK .

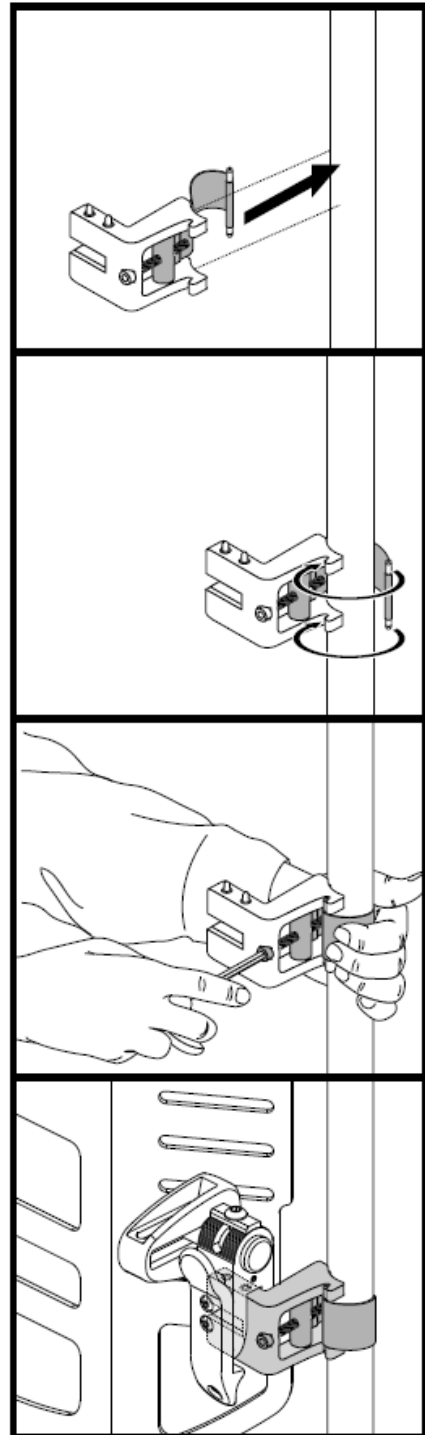


Figura 4. Instalación de las bandas a una caña/tubo

SYNERGY SHAPE BACK ANCLAJE DE 2 PUNTOS

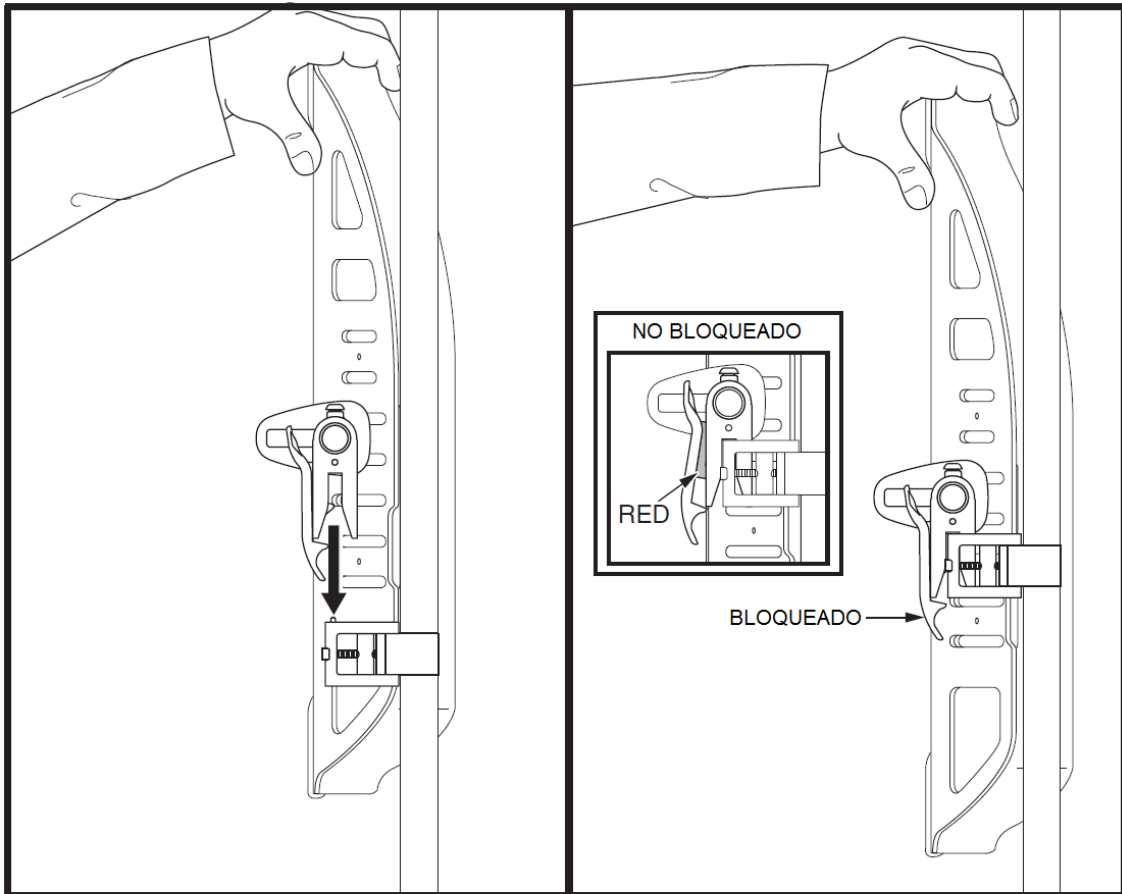


Figura 5. Instalación de Synergy Shape Back 2 Point

ANCHO DEL RESPALDO DEL ASIENTO

La anchura de ajuste del respaldo es de 2 pulgadas (5 cm) para adaptarse a diferentes anchos de silla.

Para ajustar el ancho a sillas diferentes:

1. Afloje los tornillos de posicionamiento en el bloque de montaje. Véanse las figuras 6 y 7.
2. Deslice los bloques de montaje más cerca del borde del respaldo del asiento para sillas más amplias y más cerca del centro del respaldo del asiento para sillas estrechas. Véanse las figuras 6 y 7.
3. Apriete los tornillos de posicionamiento en el bloque de montaje.
4. Repita este procedimiento para el otro lado.

NOTA: Las dos patillas resorte en cada lado del bloque de montaje deben ser cubiertas. Vea la figura 8.



¡OBLIGATORIO! No exceda la capacidad de carga que figura en el producto de 250 libras (113 kg), incluidos los accesorios.

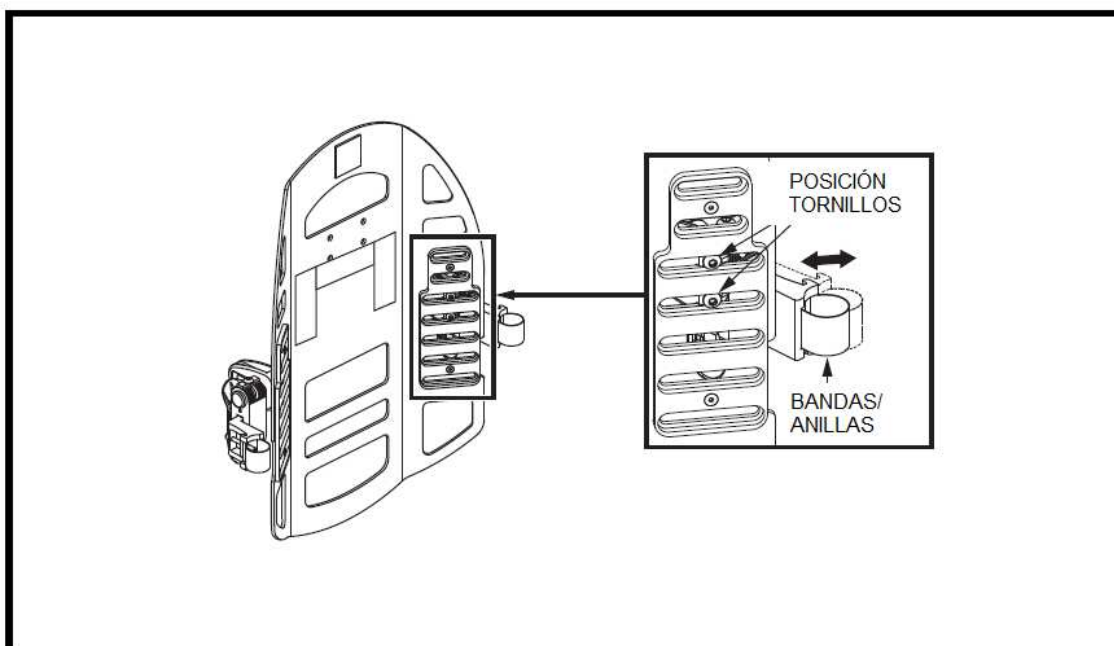


Figura 6. Ajuste anchura respaldo

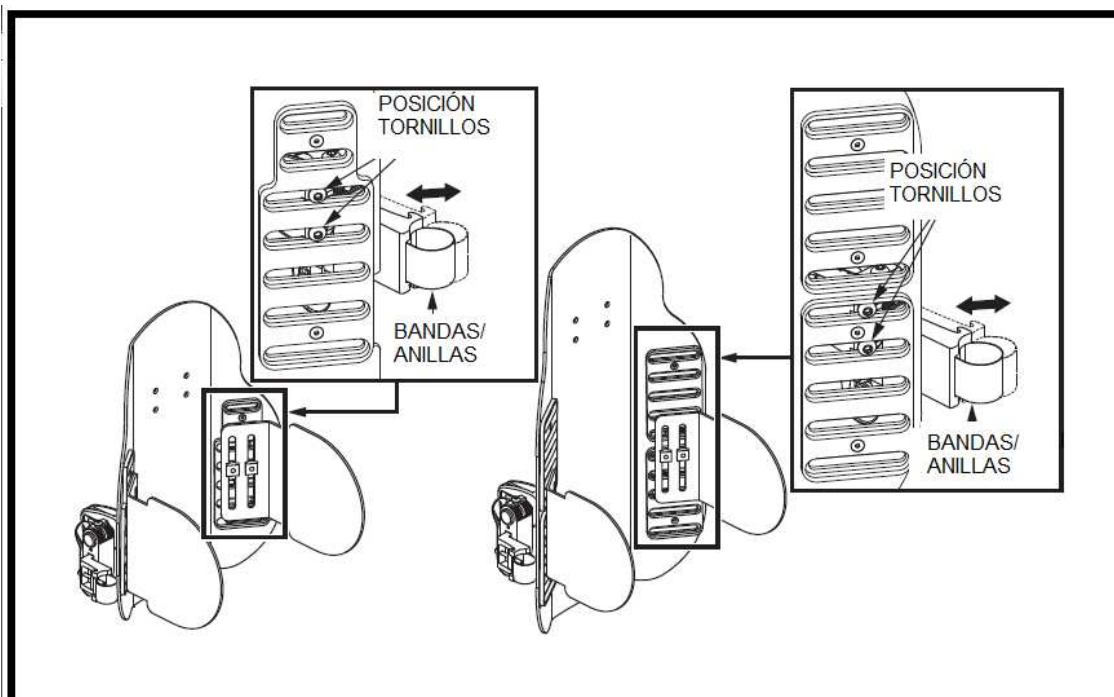


Figura 7. Ajuste anchura de respaldo – Versión contorno profundo

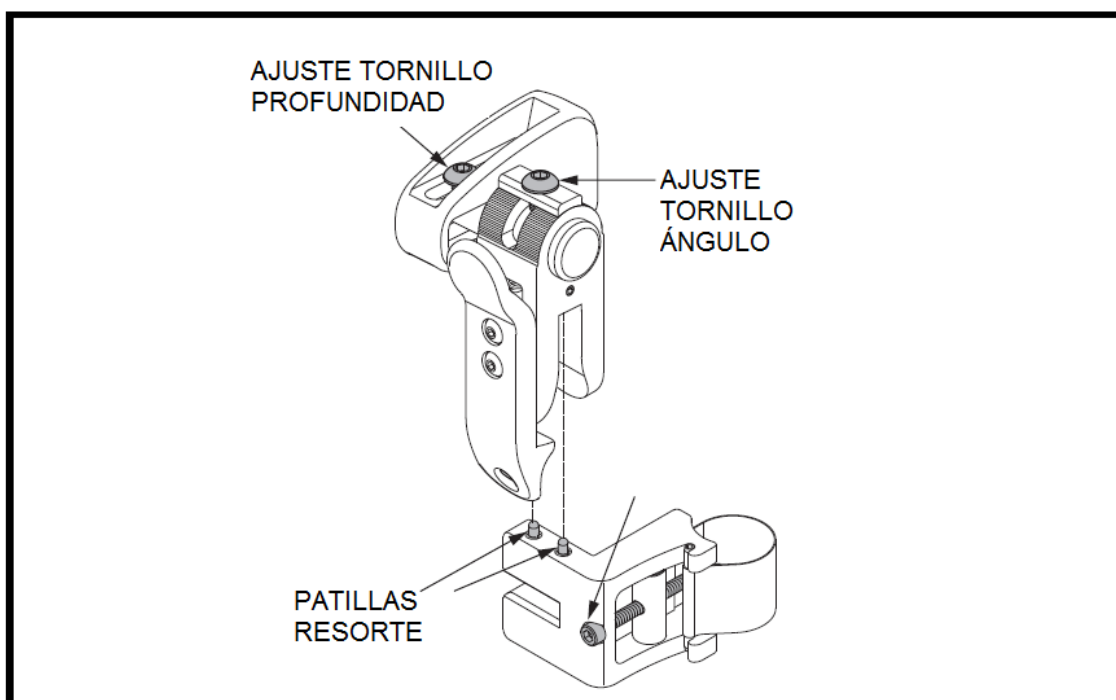


Figura 8. Montaje de componentes

5. INSTALACIÓN Y USO (SISTEMA DE MONTAJE CON TORNILLOS)

Para instalar el SYNERGY SHAPE BACK :

1. Mantenga el SYNERGY SHAPE BACK hacia arriba hasta la altura deseada en los tubos/cañas de atrás y tome nota de la ubicación.
2. Coloque las tuercas-T en cada caña de atrás y fije los soportes de fijación a las tuercas-T. Vea la figura 9.
3. Mantenga el SYNERGY SHAPE BACK hacia arriba hasta la posición deseada y móntela en los soportes de sujeción, como se muestra en la figura 9.
4. Instale el cojín del SYNERGY SHAPE BACK .



¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que el hardware esté bien apretada.

NOTA: El cierre de cremallera en el cojín se enfrentará a la parte trasera del asiento.



¡OBLIGATORIO! No exceda la capacidad de carga que figura en el producto en 250 libras (113 kg), incluidos los accesorios.

SYNERGY SHAPE BACK ANCLAJE DE 2 PUNTOS

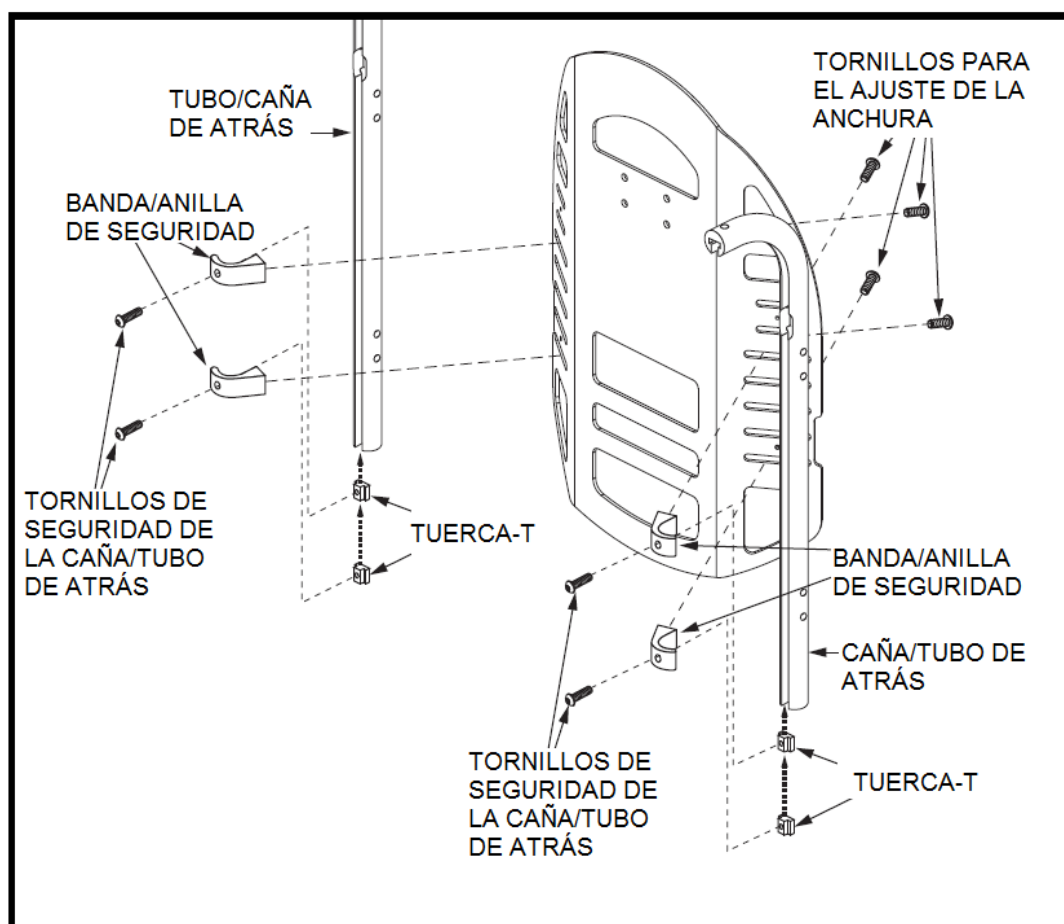


Figura 9. Instalación con tornillos

6. AJUSTES DE CONFORT (SISTEMA DE MONTAJE AJUSTABLE)

Una vez que esté familiarizado con el funcionamiento de su silla, hay ajustes que usted puede hacer a su SYNERGY SHAPE BACK para aumentar su comodidad, como cambiar la profundidad del respaldo, ángulo de reclinación y altura del respaldo. Véanse las figuras 10, 11 y 12.



¡ADVERTENCIA! Si su SYNERGY SHAPE BACK fue configurado por su terapeuta, por favor consulte a su profesional de la salud antes de cambiar la posición de su SYNERGY SHAPE BACK .



¡ADVERTENCIA! A pesar de que se recomienda que los ajustes de confort se hagan sin el ocupante en la silla, es posible ajustar la profundidad del respaldo del asiento y ángulo de reclinación con el ocupante en la silla. El ocupante debe salir del respaldo antes de hacer cambios en la altura y anchura del respaldo.

PROFUNDIDAD DEL RESPALDO DEL ASIENTO

La profundidad del respaldo es de 2 pulgadas (5 cm).

Para cambiar la profundidad del respaldo:

1. Afloje los dos tornillos de ajuste de la profundidad. Vea la figura 10.
2. Coloque el respaldo en la profundidad deseada.
3. Apriete los dos tornillos de ajuste de la profundidad.



¡ADVERTENCIA! Cuando haya finalizado los ajustes, asegúrese de que ambos tornillos de ajuste de profundidad están apretados.

ÁNGULO DE RECLINACIÓN

El ángulo de reclinación se puede ajustar de -33° a 57°.

Para aumentar el ángulo de reclinación:

1. Afloje el tornillo de ajuste del ángulo de cada bloque de montaje y levante la arandela de presión. Vea la figura 11.
2. Coloque el respaldo en la posición deseada.
3. Apriete los tornillos de ajuste de ángulo y fije las arandelas de presión.



¡ADVERTENCIA! Cuando haya finalizado los ajustes, asegúrese de que ambos tornillos de ajuste de ángulo están apretados.

SYNERGY SHAPE BACK ANCLAJE DE 2 PUNTOS

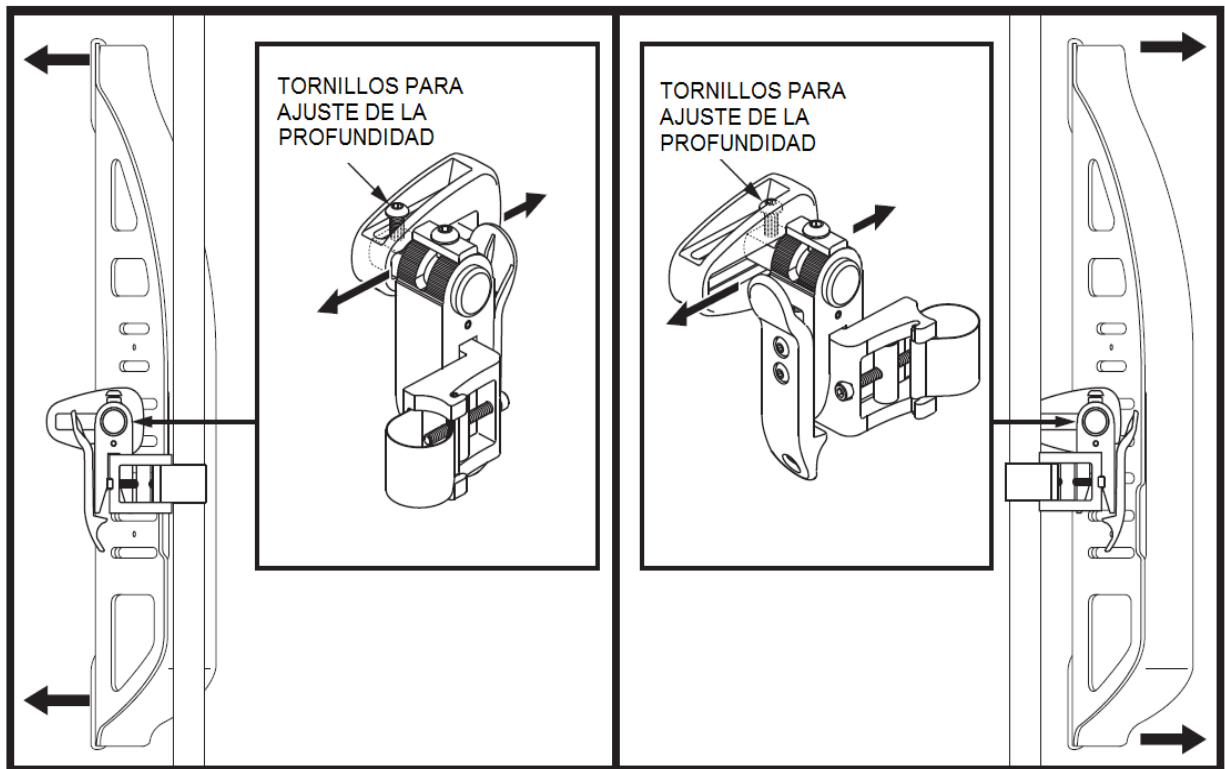


Figura 10. Ajuste de la profundidad del respaldo

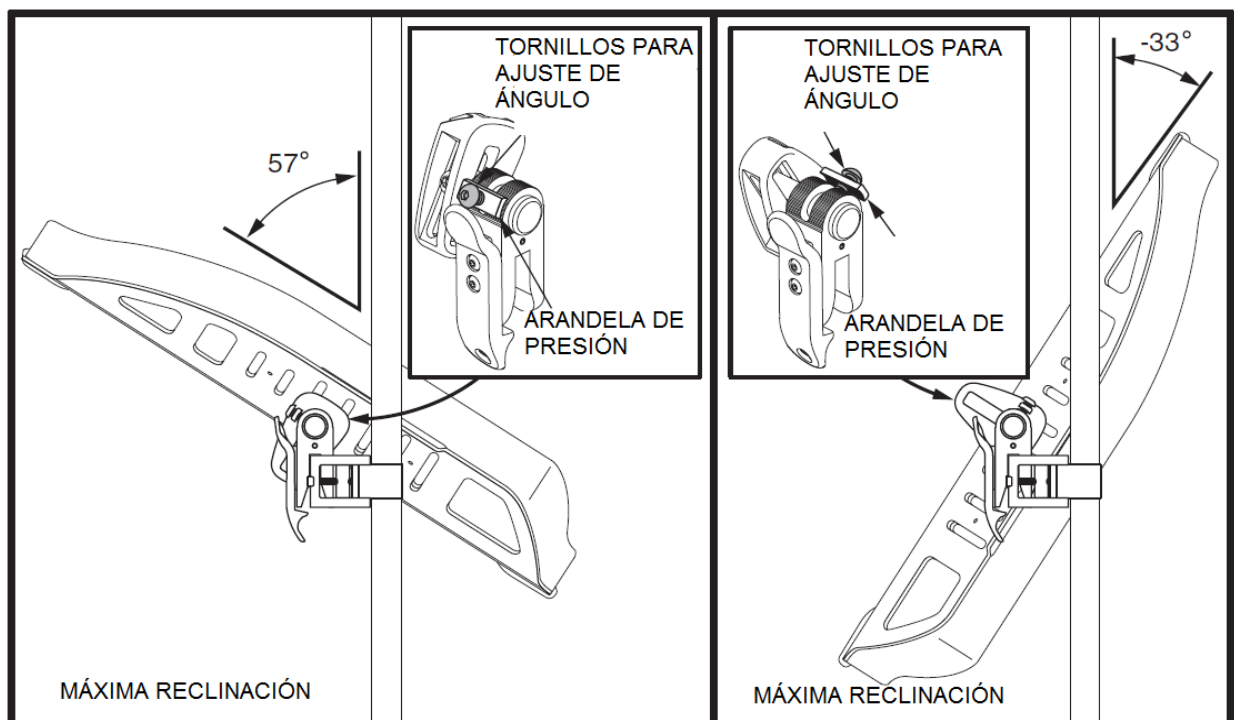


Figura 11. Ajustes máximos de reclinación

ALTURA DEL RESPALDO

La altura del respaldo depende de la longitud de la caña/tubo de atrás.



¡ADVERTENCIA! El ocupante debe ser retirado de la silla antes de ajustar la altura del respaldo.

Para ajustar la altura del respaldo:

1. Bloquee las ruedas o apague el controlador si este está equipado.
2. Afloje el tornillo de ajuste de la altura de cada soporte de montaje.
3. Coloque el respaldo a la altura deseada. Vea la figura 12.
4. Apriete los tornillos de ajuste de altura.



¡ADVERTENCIA! Cuando haya finalizado los ajustes, asegúrese de apretar los dos tornillos de ajuste de altura.

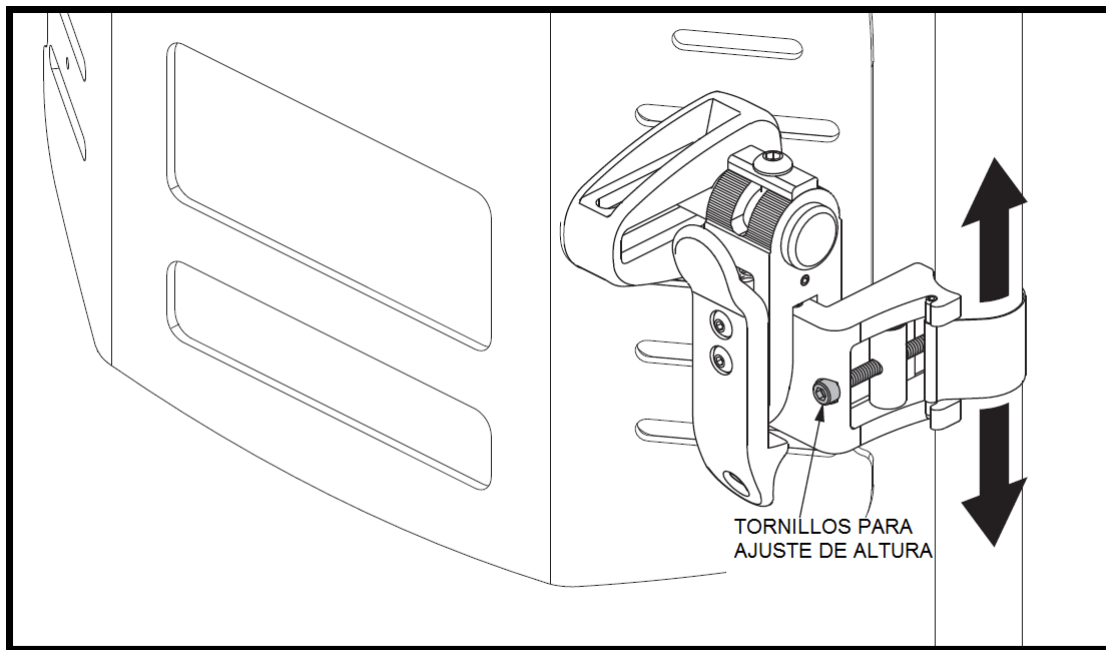


Figura 12. Ajuste de la altura del respaldo

7. EXTRAER EL SYNERGY SHAPE BACK (SISTEMA DE MONTAJE AJUSTABLE)

Su SYNERGY SHAPE BACK se puede quitar fácilmente utilizando el sistema QuickRelease.



¡ADVERTENCIA! No intente retirar el SYNERGY SHAPE BACK cuando la silla esté ocupada.

Para quitar el Synergy:

1. Ajuste el bloqueo de las ruedas o apague el controlador si este está equipado.
2. Golpee o bien la palanca de liberación superior o inferior en la parte posterior del respaldo del asiento y tire hacia arriba del respaldo del asiento. Vea la figura 13.

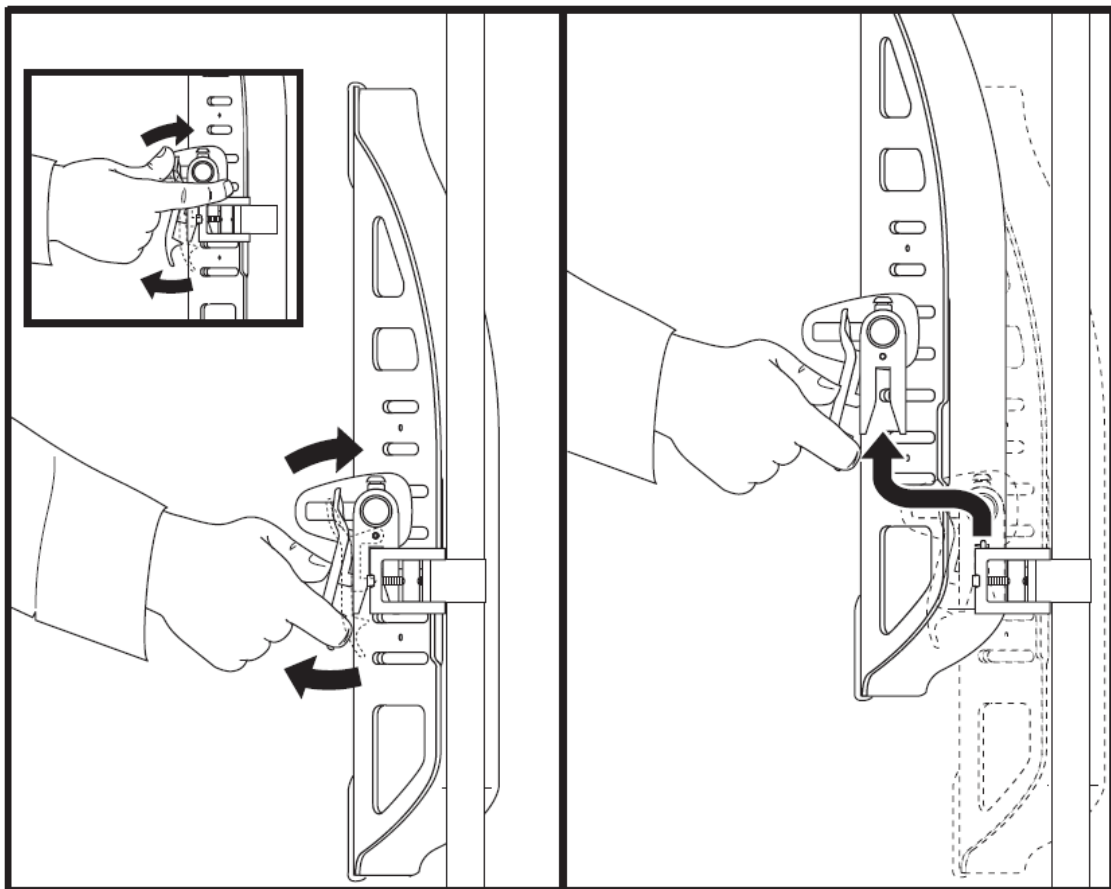


Figura 13. Extraer la Synergy Shape Back 2 Point.

8. LIMPIEZA

El SYNERGY SHAPE BACK se puede limpiar fácilmente.

Para limpiar el SYNERGY SHAPE BACK :

1. Localice la cremallera en el lado posterior de la cubierta exterior. Vea la figura 14.

2. Abra la cubierta y tire de la almohadilla interior.

3. Lave la cubierta exterior en una lavadora en el ajuste FRIO.



¡ADVERTENCIA! No utilice lejía para lavar la cubierta.



¡ADVERTENCIA! Nunca sumerja la almohadilla interior de su SYNERGY SHAPE BACK en el agua. La almohadilla interior está protegida por una cubierta resistente a los líquidos, pero no está hecha para la soportar la exposición directa al agua.

4. Deje que la cubierta exterior se seque al aire.



¡ADVERTENCIA! No intente poner la cubierta exterior en la secadora. Esto puede causar encogimiento.

5. Una vez seco, vuelva a colocar la almohadilla interior dentro de la cubierta. Cierre la cubierta y vuelva a colocar el SYNERGY SHAPE BACK en el asiento de su silla.

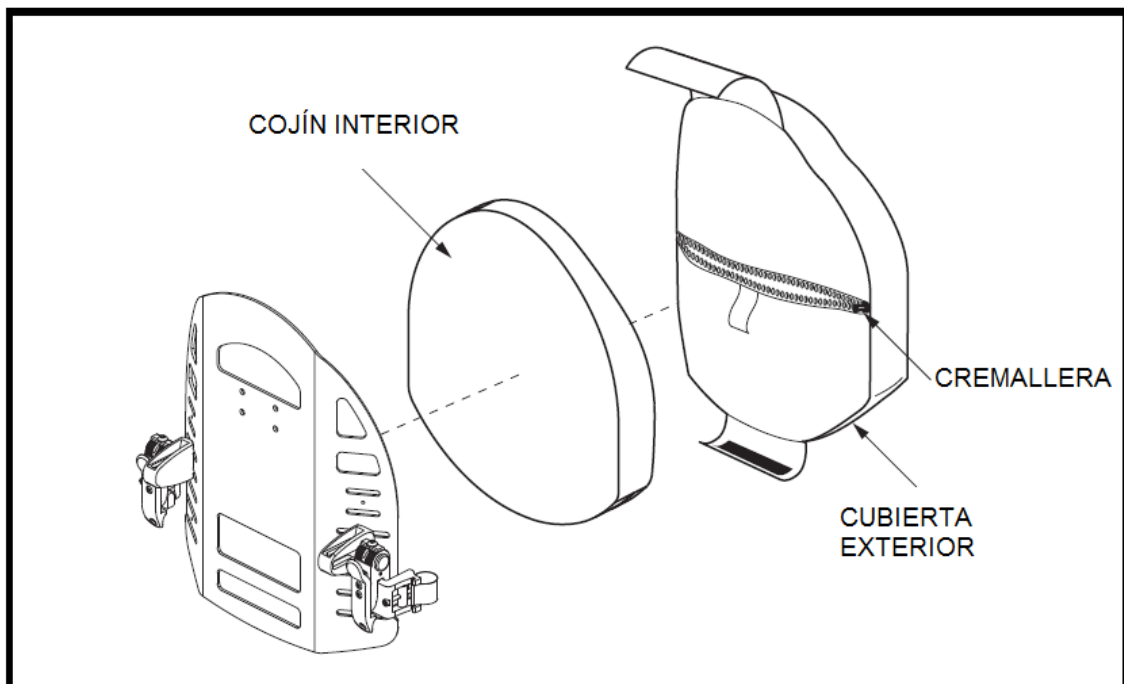


Figura 14. Cremallera de apertura de la cubierta exterior

9. ALMACENAMIENTO

El SYNERGY SHAPE BACK no se debe almacenar en lugares extremadamente calientes ni fríos.



¡ADVERTENCIA! Las temperaturas extremas pueden afectar a la temperatura de los componentes de los asientos del sistema y pueden causar irritación en la piel. Tenga cuidado si su producto ha sido usado o almacenado en un lugar muy caluroso o frío.

10. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su silla debe eliminarse de acuerdo con las leyes locales y disposiciones legales nacionales. Comuníquese con su agencia local de eliminación de residuos para obtener información sobre la correcta eliminación de embalajes, componentes del marco del metal, componentes de plástico, electrónicos, baterías, neopreno, silicona, poliuretano y otros materiales.

Esté al tanto de los peligros de seguridad mientras esté fumando.



¡ADVERTENCIA! Su distribuidor le recomienda que no lo fume cigarrillos mientras esté sentado en su sistema de transporte aunque el sistema de asientos ha pasado los necesarios requisitos de pruebas de consumo de cigarrillos. Usted debe cumplir con las siguientes normas de seguridad si usted decide fumar cigarrillos mientras está sentado en su sistema de transporte.

- No deje cigarrillos encendidos sin vigilancia.
- Mantenga los ceniceros a una distancia segura del sistema de transporte.
- Siempre asegúrese de que los cigarrillos estén completamente extinguidos antes de su eliminación.

Todo los materiales del SYNERGY SHAPE BACK se deben de comprobar mensualmente para asegurarse de que esté todo bien ajustado.



¡ADVERTENCIA! Apriete cualquier parte de inmediato para evitar daños en el producto y lesiones personales al usuario o a otras personas.

11. GARANTÍA

El SYNERGY SHAPE BACK está diseñado y producido con los más altos estándares. Nuestro cojín SYNERGY SHAPE BACK está garantizado para estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de 24 meses. La cubierta exterior está garantizada de estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de 90 días. Si algún defecto en el material o mano de obra se encontrara, diríjase a su distribuidor. Esta garantía no cubre el mal uso aplicado por parte del usuario.

12. NOTAS



Importado por:
Ayudas Dinámicas
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

